



Биомассажер Инструкция по эксплуатации

FH-PMD-02




Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования. Фотографии товара представлены только для справки.

Патенты

1. Патент на промышленный образец (внешний вид) № 202130010399.2
2. Патент на полезную модель № 201821722009.33.
3. Патент на изобретение № 201811238835.5

Основные функции

Прибор имеет 4 основных режима: импульс, отрицательное давление(вакуум), лазер и терморезим.

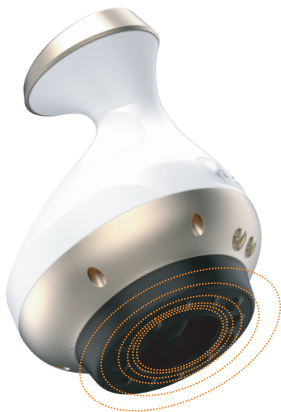

Импульс



Отрицательное
давление



Лазер



Терморезим

Технические характеристики

Напряжение питания	Встроенная литиевая батарея 7,4 В/1200 мАч
Номинальная мощность	≤10Вт
Импульсный режим	99 уровней
Вакуум(отриц.давление)	5 уровней
Терморежим	5 уровней
Лазерный режим	2 уровня мощности: высокий и низкий
Управление	6 сенсорных клавиш и 1 кнопка.
Дисплей	Цифровой
Прибор имеет индикатор состояния в режиме реального времени.	


Комплектация / Гарантия

Номер	Наименование	Количество	Гарантия
1	Массажер	1 шт.	1 год
2	Зарядная база	1 шт.	6 месяцев
3	Адаптер	1 шт.	6 месяцев
4	Лазерный провод	1 шт.	3 месяца
5	Импульсный провод	1 шт.	3 месяца
6	Хлопковый фильтр	30 шт.	нет
7	Крем для массажа	1шт.	нет
8	Электродные подушечки	1 пара	нет
9	Токопроводящие перчатки	1 пара	нет
10	Изоляционные перчатки	1 пара	нет
11	Инструкция	1 шт.	нет
12	Сертификат	1 шт.	нет


Описание

Массажер

- ❶ Панель управления
- ❷ Корпус
- ❸ Зарядная база

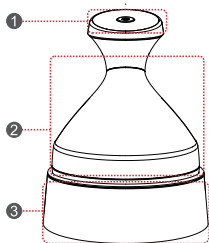


- ❹ Импульсный разъем
- ❺ Разъем для зарядки
- ❻ Индикатор зарядки
- ❼ Лазерный разъем
- ❽ Термомассажер

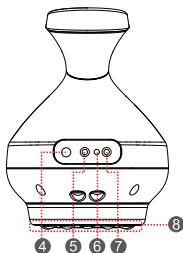

Панель управления

- ❶ Кнопка уменьшения
- ❷ Кнопка увеличения
- ❸ Дисплей
- ❹ Функция импульса
- ❺ Функция отрицательного давления(вакуум)
- ❻ Функция лазера
- ❼ Функция термомассажа
- ❽ Вкл/Выкл


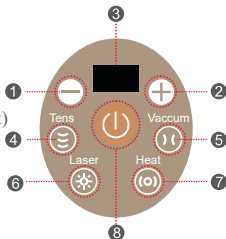


Инструкция по эксплуатации

(1) На чистую кожу нанесите специальный крем для массажа, который входит в набор, не рекомендуется использовать другие средства.


(2) Выбор режима массажа:

- ❶ Чтобы включить прибор, удерживайте кнопку Вкл/Выкл; чтобы выключить прибор, просто еще раз нажмите кнопку Вкл/Выкл.

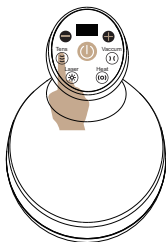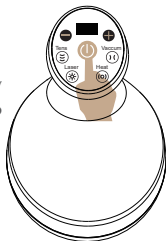


- ❷ Выберите импульсный режим массажа, с помощью кнопок увеличения/уменьшения "+/-" установите уровень интенсивности от 0 до 99.

- ❸ Выберите режим отрицательного давления (вакуумный массаж), с помощью кнопок увеличения/уменьшения "+/-" установите уровень интенсивности от 0 до 5.

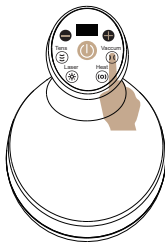


(Важно! После вакуумного массажа нельзя принимать душ в течение 6 часов)

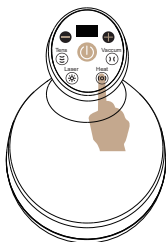

- 4 Выберите режим термомассажа, с помощью этой же кнопки термомассажа установите уровень интенсивности от 0 до 5.

- 5 Выберите режим массажа лазером, с помощью этой же кнопки лазера установите уровень интенсивности от 0 до 2.

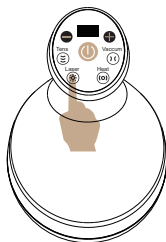

(Примечание: для массажа лазером подключите лазерный провод!)

Меры предосторожности

Перед проведением массажа отрицательным давлением (вакуумный массаж), убедитесь, что установлен новый хлопковый фильтр.

Очистка фильтра

- После завершения массажа отрицательным давлением поверните съемный фильтр против часовой стрелки, как показано на рисунке.
- Выньте силиконовую пробку, извлеките хлопковый фильтр, аккуратно его очистите от массажного крема.
- Вставьте чистый хлопковый фильтр в силиконовую пробку, затем установите силиконовую пробку обратно в съемный фильтр.



2.Каждый раз после проведения массажа отрицательным давлением (длительность массажа составляет 15 минут) необходимо извлечь съемный фильтр, удалить хлопковый фильтр, очистить съемный фильтр от загрязнений и остатков массажного крема, а после установить новый хлопковый фильтр.

3.Входящие в комплект перчатки используются при импульсном массаже, сначала необходимо надеть изоляционные перчатки, а затем смоченные в воде токопроводящие перчатки.

4. Электродные подушечки используются при импульсном массаже и прикрепляются непосредственно к телу в тех местах, где это необходимо.

5. Если при массаже лазером не подключен лазерный провод, на дисплее появится уведомление «L», напоминая, что нужно подключить лазерный провод.

6. Если уровень заряда батареи низкий, на дисплее появится уведомление «U», напоминая, что необходимо зарядить прибор.


7. Массаж отрицательным давлением длится 15 минут, остальные режимы - каждый по 30 минут. Если использовать несколько режимов одновременно, то длительность процедуры по умолчанию будет составлять 15 минут. После завершения массажа прибор издаст звуковой сигнал (5 раз) и перейдет в режим ожидания, при этом дисплей будет находиться в спящем режиме (выключен), за исключением кнопок "+/-". В процессе зарядки индикатор горит желтым цветом; когда индикатор горит зеленым цветом, это означает, что прибор полностью заряжен.

8. После 5 минут в режиме ожидания прибор издаст длинный звуковой сигнал, кнопки "+/-" погаснут, массажер выключится.

9. Используйте специальный массажный крем, который входит в комплект; не рекомендуется применять другие средства.

Стерилизация

Зарядная база массажера имеет встроенную ультрафиолетовую лампу, это позволяет одновременно заряжать прибор и осуществлять дезинфекцию массажной головки.

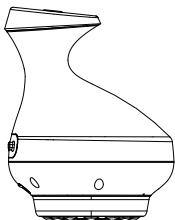

Массажер



Зарядная база

Противопоказания

1. Высокая температура, кровотечения и другие заболевания, связанные с кровотечениями, послеоперационный период (6 месяцев).
2. Инфаркт миокарда, инсульт, кровоизлияние в мозг, апоплексия головного мозга и другие серьезные заболевания.
3. Наличие кардиостимулятора или других инородных предметов в теле.
4. Беременность, менструация, детский возраст.
5. Варикозное расширение вен.
6. Инфекционные заболевания кожи.
7. Тяжелые заболевания.
8. Люди с гипогликемией или гипертонией должны проконсультироваться со специалистом перед использованием;
9. При массаже лазером строго запрещается направлять лазерный провод в область глаз.



Производитель: Гуанчжоу Hezhiyoude Technology Co., Ltd.
(Тяньцзиньская фармацевтическая компания Хэчжи Юде)

Адрес производителя: Китай, Гуанчжоу, район Паньюй, пос. Шицзи,
улица Юнфен, 19, стр.3, 4-й этаж, офис 402.

Телефон поддержки клиентов: 4000-826-567

Исполнительный стандарт: Q/HZYD 4 2020

Номер издания: 1.18.0513A1

Дата редакции: 2021.04